

LM

feel the
difference

PER CRESCERE CON UNO SPLENDIDO SORRISO

INTERVENTO
ORTODONTICO PRECOCE




LMActivator™

Come funziona LM-Activator™?

- Se uno o più denti non sono nella posizione giusta, LM-Activator™ funziona come una guida indirizzandoli nella posizione ideale. Il silicone molto elastico applica forze leggere che sono comunque in grado di spostare i denti nella posizione corretta. La speciale forma di LM-Activator™ consente di lasciare inalterati i denti correttamente posizionati senza provocare movimenti indesiderati.
- Guidando la mandibola nella corretta posizione, LM-Activator™ promuove lo sviluppo ideale anche del viso.

Come si usa LM-Activator™?

- LM-Activator™ va portato mentre si dorme. In alcuni casi è consigliato l'utilizzo anche durante il giorno.
- Usare LM-Activator™ è confortevole. Durante i primi giorni può presentarsi un normale senso di fastidio, significa che LM-Activator™ sta "lavorando", applicando una certa forza ai denti. Questa sensazione sparirà presto e ci si abituerà velocemente a LM-Activator™.
- L'uso regolare è essenziale per il successo del trattamento, perciò è importante creare una routine fin dall'inizio.

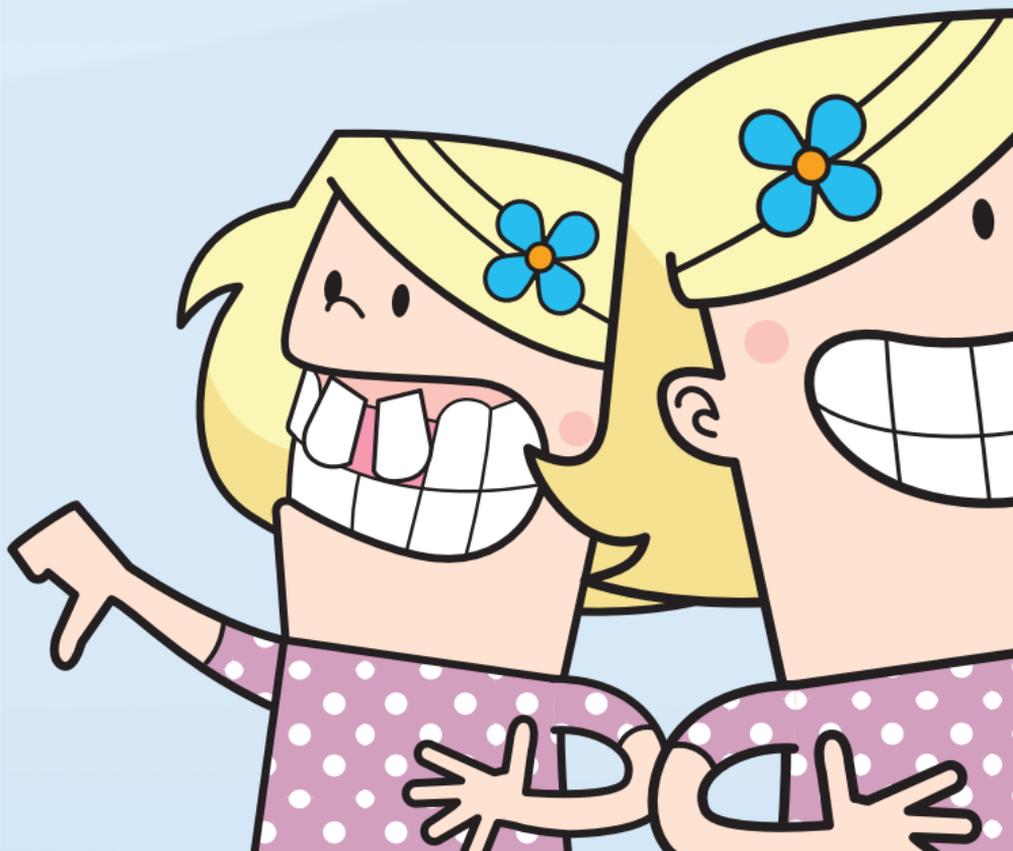

A che età si usa LM-Activator™?

- LM-Activator™ può essere usato a diverse età. Spetta al dentista stabilire il momento più opportuno. Alcuni pazienti trovano beneficio iniziando il trattamento già all'età di cinque o sei anni.
- Quando cade il primo dente da latte dall'arcata superiore ci sono le migliori opportunità per correggere lo sviluppo dentale con questo dispositivo perché le radici dei denti permanenti non sono ancora sviluppate e si può intervenire con grande successo. Con le radici in crescita i risultati delle correzioni sono decisamente maggiori. I pazienti più adulti con malocclusioni più gravi potrebbero avere necessità di abbinare anche altre apparecchiature ortodontiche che applicano forze differenti.



"HA FUNZIONATO BENISSIMO! AVEVO UN OVERJET DI QUASI 1 CM, QUANDO HO FINITO ERA DIMINUITO A CIRCA 3 MM. HA FUNZIONATO SUL SERIO!"

Ragazza, 14 anni, Svezia

Čirgić, E., Kjellberg, H., Hansen, K., & Lepp, M. (2015). Adolescents' experiences of using removable functional appliances. *Orthodontics & cranofacial research*.



Inizio trattamento *



Dopo 1 anno *

* Immagini cliniche gentilmente concesse da Dott.sa Rita Myrland e Dott.sa Mari Dubland, University of Tromsø, Norvegia.

Quali sono i vantaggi di LM-Activator™?

- Il silicone liscio e flessibile e la forma anatomica con bordi arrotondati rendono confortevole l'uso di LM-Activator™.
- Il silicone è morbido per definizione, quindi non sono necessari componenti chimici per renderlo più morbido. Inoltre, LM-Activator™ è privo di additivi. Non ci sono coloranti né aromatizzanti, ftalati o derivati, bisfenolo o lattice.
- LM-Activator™ è facile da pulire e può essere disinfettato facendolo bollire in acqua quando necessario (ad es., a causa di un'influenza).

LM-Activator™ è un dispositivo mobile, che offre molti vantaggi rispetto, per esempio, a un'apparecchiatura fissa con attacchi in metallo:

- È possibile mangiare qualsiasi cibo normalmente.
- Permette di lavare i denti come al solito, inoltre LM-Activator™ è facile da pulire.
- Non compromette la possibilità di allenarsi e fare sport.
- LM-Activator™ è facile da usare e non prevede la regolazione del filo metallico. Si risparmia così tempo e fatica.

Quali sono i vantaggi di un trattamento precoce?

- Intervenendo precocemente, è possibile prevenire lo sviluppo di una malocclusione (problema occlusale). La ricerca indica che piccole malocclusioni non corrette svilupperanno problemi più gravi.
- Allineare denti anteriori in protrusione riduce il rischio che un dente si possa danneggiare accidentalmente.
- L'autostima migliora sensibilmente quando si ha una corretta occlusione.
- La malocclusione può aumentare il rischio di carie. Correggendola senza aspettare, si riduce sensibilmente la possibilità di carie.
- Nelle terapie precoci, sono ideali trattamenti poco invasivi, come l'uso di LM-Activator™ al posto di tecniche più complesse.



LM-Activator™ è un dispositivo realizzato in silicone medicale che funziona come attivatore e allineatore dentale.

Stimola il corretto sviluppo dentale e mandibolare dei bambini. Se un dente non sta erompendo correttamente, LM-Activator™ funziona da guida per promuoverne delicatamente la corretta posizione. Allo stesso tempo, LM-Activator™ supporta lo sviluppo naturale del viso perché controlla anche la relazione tra mascella e mandibola.

Intervenire immediatamente quando viene rilevato un piccolo problema può essere importante per evitare che peggiori diventando grave. LM-Activator™ funziona come una guida delicata per la corretta posizione dei denti e della mandibola evitando eventuali posizioni non sane.



LM Dental™

Contatta il tuo dentista per istruzioni più dettagliate.



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finlandia

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com



Per maggiori informazioni:

www.lm-dental.com/LM-Activator