

LM™ Extraction

LM

feel the
difference



Estrazioni sicure

LMliftOut™

LMliftOut™


Leve lussatrici per estrazione atraumatica

Gli strumenti LM-LiftOut™ permettono di effettuare estrazioni nel modo meno traumatico possibile. Ciò è importante per accelerare il processo di guarigione e favorire il successivo posizionamento della protesi. La sottile punta viene introdotta nello spazio parodontale e fatta progredire lentamente verso l'apice della radice mentre lo strumento viene fatto ruotare delicatamente attorno al dente in senso orario e antiorario. LM-LiftOut™ non è adatto all'uso come leva per estrazione forzata.




Angolazioni e dimensioni

Lama dritta

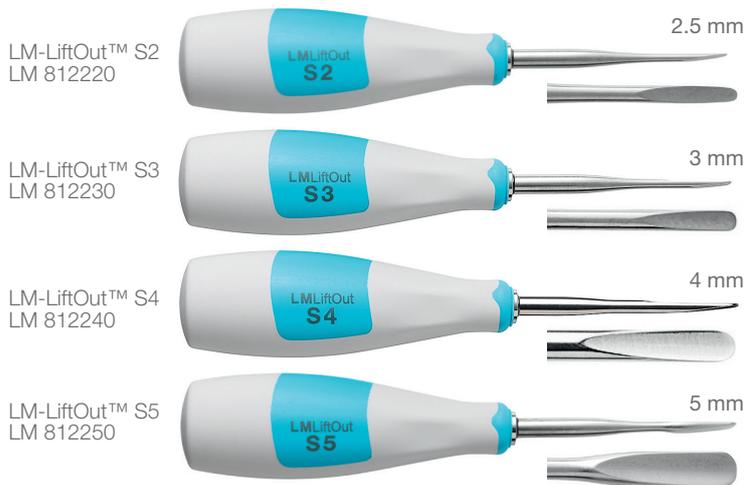

Lama curva

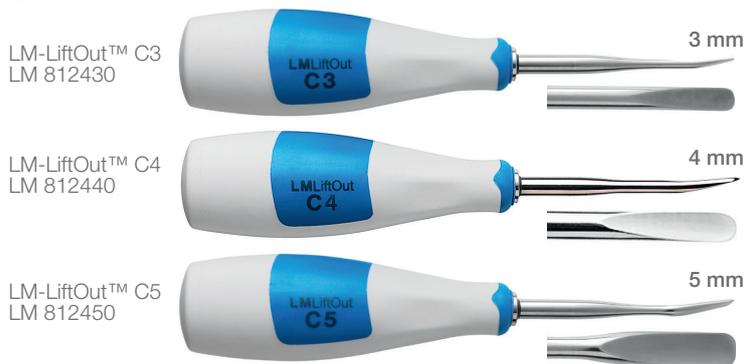

Estrazione sicura e lussazione atraumatica

Ergonomia e sensibilità tattile LM™, anche per gli strumenti di estrazione

Caratteristiche	Vantaggi
Design ergonomico	– impugnatura comoda e da maneggiare
Superficie LM-ErgoTouch™	– impugnatura leggera e antiscivolo
Bilanciamento ottimale	– ottimo controllo della presa
Leggerezza	– maggiore maneggevolezza
Chiara codifica a colori	– facilità di identificazione
Super-acciaio LM-DuraGradeMAX™	– lame robuste e affilate
Perfetta connessione impugnatura/lama	– igiene estrema



Strumenti di estrazione LM™ valutati come Miglior Prodotto 2014.




Scopri di più
scansionando
il codice QR!

LM SlimLift™

Leve lussatrici progettate per zone estremamente strette

Gli strumenti LM-SlimLift™ sono progettati per accedere a punti difficilmente raggiungibili con le tradizionali leve lussatrici. Permettono di eseguire l'estrazione del dente in modo ancora più atraumatico grazie alle punte estremamente sottili adatte a spazi molto stretti, consentendo una guarigione rapida. La sottile punta viene introdotta nello spazio parodontale e fatta progredire lentamente verso l'apice della radice mentre lo strumento viene fatto ruotare delicatamente attorno al dente in senso orario e antiorario. LM-SlimLift™ non è adatto all'uso come leva per estrazione forzata.

Il design estremamente sottile della lama permette estrazioni meno traumatiche

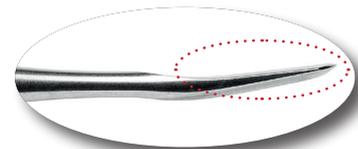

Strumenti LM-SlimLift™ a punta fine - una soluzione realmente atraumatica

MD, DDS, D.Med.Sc, Oral Surgeon
Peter Jungell
Helsinki, Finland



“Attualmente utilizzo gli strumenti LM-SlimLift™ per eseguire quasi tutte le estrazioni. Utilizzo anche i miei strumenti di lussazione preferiti più vecchi, mentre l'uso di quelli tradizionali è ora meno frequente.

Lo strumento di lussazione a punta fine LM™ può essere introdotto anche in spazi parodontali particolarmente stretti. Quando si usano strumenti con lama più larga, la forza di lussazione si distribuisce su un'area più ampia verso i lati e più in profondità verso l'apice delle radici, in modo da ridurre al minimo il rischio di fratturare le radici più fragili. Nella maggior parte dei casi è possibile eseguire l'estrazione utilizzando gli strumenti di lussazione senza dover ricorrere ad altre procedure operatorie.

Il design e il materiale dello strumento LM-SlimLift™ consentono di ottenere una presa eccellente. Di primo acchito, l'impugnatura

può sembrare troppo grande, in realtà ho notato che durante l'uso clinico si adatta perfettamente alla mano. Lo strumento può essere impugnato sia con tutto il palmo della mano o solo con le dita. L'ampia gamma di misure disponibili facilita la scelta dello strumento più adatto per qualsiasi necessità clinica. Le lame ampie costituiscono la soluzione ideale per l'estrazione dei molari inferiori mentre le punte fini sono perfette, ad esempio, per l'estrazione delle radici più strette dei denti superiori.

Posso consigliare gli strumenti LM-SlimLift™ a tutti i dentisti: sarebbe opportuno abbandonare totalmente strumenti vecchi e poco performanti. Troppo spesso si sente di casi di estrazione nei quali la gestione dell'apice ha richiesto quasi due ore di trattamento”.

Angolazioni e dimensioni

Lama dritta

LM-SlimLift™ S3
LM 812630



3 mm

LM-SlimLift™ S4
LM 812640



4 mm

LM-SlimLift™ S5
LM 812650



5 mm

Lama curva

LM-SlimLift™ C3
LM 812830



3 mm

LM-SlimLift™ C4
LM 812840



4 mm

LM-SlimLift™ C5
LM 812850



5 mm

LM TwistOut™

LM TwistOut™

Leve lussatrici per estrazione forzata

Gli strumenti LM-TwistOut™ sono adatti per l'estrazione di denti in situazioni in cui è necessario applicare grande forza o eseguire un movimento di torsione.



“Questa leva per estrazione di LM™ è ideale per le situazioni in cui è necessario applicare un movimento di torsione”.

Bite Magazine, agosto 2014
Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia

”Ho scoperto questa leva per estrazione l’anno scorso, in occasione dell’Australian Dental Congress di Melbourne. Avendo uno studio dentistico in una località rurale, dove probabilmente pratichiamo più estrazioni rispetto ad una città, posso garantire che questo dispositivo è molto pratico.


Trovo che le leve lussatrici siano spesso troppo sottili e se viene applicata un po' troppa pressione, la lama tende a piegarsi o rompersi. Questa leva per estrazione di LM™ è invece ideale per le situazioni in cui è necessario applicare un movimento di torsione.

Utilizzo questa leva per tutte le estrazioni e dispongo del kit completo di modelli sia con lama dritta che curva in tutte le misure. È uno strumento semplice e molto resistente che rende molto più semplice eseguire un’extrazione.


Mi ero chiesto più volte perché sul mercato non esistesse una leva per lussazione più robusta ma, a quanto pare, questa leva per estrazione è esattamente quello che cercavo!”

Angolazioni e dimensioni

Lama dritta

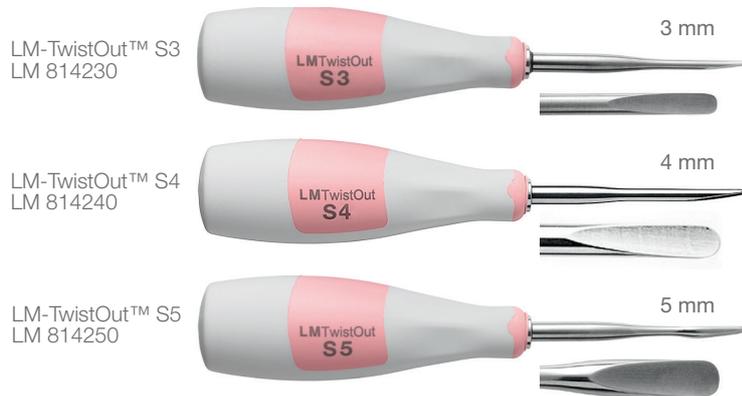

Lama curva

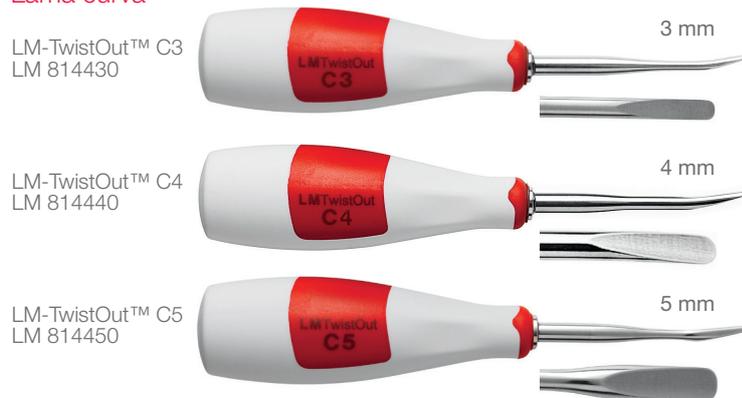

Manutenzione facile

Cassetta LM 810001

Gli strumenti per estrazione sono forniti in una pratica cassetta che protegge sia lo strumento che l'operatore durante il ciclo di manutenzione. La cassetta evita che lo strumento perfori il sacchetto di sterilizzazione, assicurandone la sterilità. La cassetta può essere identificata con un codice colore mediante il sistema di bottoni.

Pietra per affilare LM 818002

Se sono utilizzate correttamente e sottoposte a regolare manutenzione, le lame, rifinite artigianalmente e realizzate in super acciaio LM-DuraGradeMAX™, restano affilate e durano a lungo. Affilate di tanto in tanto gli strumenti per estrazione utilizzando questa pietra per affilare rotonda, che consente di tenerli sempre in perfette condizioni e pronti all'uso in modo semplice e rapido.



Leve per radici

Root Tip Pick LM 769-771 XSI/ES

- per la rimozione della punta della radice
- ideale per tutte le aree difficili da raggiungere



LM-RootOut™ LM 812210

- progettato per le delicate operazioni di elevazione della radice e per la rimozione di frammenti radicolari
- non raccomandato per la rimozione di frammenti più consistenti
- simile alle leve di Heidbrink
- impugnatura ergonomica per una migliore presa

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

