

LM Implant Misura MR

LM

feel the
difference




Inserimento ottimale dell'impianto

Guida al corretto inserimento mesio-distale dell'impianto

Gli strumenti LM Implant Misura MR facilitano il posizionamento della prima fresa a spirale a una corretta distanza dal moncone, cioè dall'impianto o dall'elemento naturale adiacente all'impianto, rispettando la biologia ossea.


Questo fornisce una corretta quantità di osso tra l'impianto e il dente, facendo sì che la cresta ossea rimanga stabile nel tempo. Il rispetto della biologia e la spaziatura corretta assicurano un risultato estetico di lunga durata.

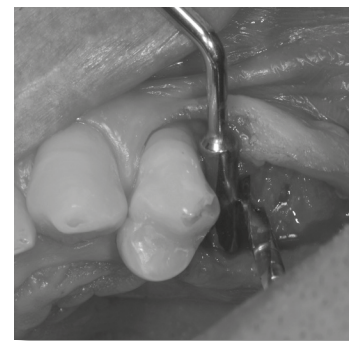

Caso clinico 1: Impianto adiacente a un elemento naturale


- Scegliere lo strumento di misura appropriata in base all'impianto da inserire
- Appoggiare saldamente la punta cilindrica (evitando qualsiasi movimento) contro la radice dell'elemento naturale vicino all'impianto
- Assicurarsi che la punta dello strumento appoggi contro la radice e non contro la cresta dell'osso prossimale
- Appoggiare la fresa iniziale contro la punta cilindrica e verificare che la posizione bucco-linguale e l'inclinazione mesio-distale siano entrambe corrette
- Un'inclinazione mesio-distale imprecisa può causare un aumento o una diminuzione della distanza tra l'impianto e il dente
- Dopo la prima osteotomia, procedere seguendo il normale protocollo implantare



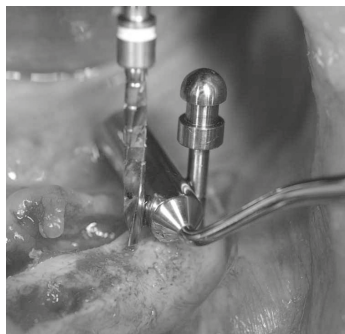

Caso clinico 2: Impianto adiacente a un altro impianto in arcata edentula

- Eseguire la prima osteotomia (generalmente la più distale) con la sola fresa iniziale
- Inserire un perno dello stesso diametro della fresa iniziale nell'osteotomia
- Poggiare lo strumento Implant Misura selezionato contro il perno, avendo cura di non muoverlo con una pressione eccessiva
- Eseguire la seconda osteotomia con la prima fresa iniziale
- Verificare sempre il corretto posizionamento della fresa sia rispetto alla direzione bucco-linguale sia rispetto all'inclinazione mesio-distale
- Procedere seguendo il normale protocollo implantare

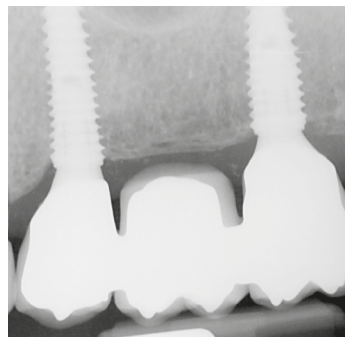

Caso clinico 3: Impianto adiacente a un altro impianto parzialmente edentula

- Iniziare sempre dall'impianto adiacente all'elemento naturale
- Procedere come descritto al punto 2

LM Implant Misura MR di Style Italiano



Gli strumenti sono progettati da Marco Redemagni MD, DDS. Style Italiano è un gruppo di studio formato da clinici e ricercatori appassionati con specializzazione nel campo dell'odontoiatria restaurativa estetica.

Ulteriori informazioni su www.styleitaliano.org
e www.facebook.com/styleitaliano.



"Questi strumenti sono veramente essenziali durante il posizionamento della prima fresa"

Marco Redemagni MD, DDS

Le marcature sulla punta facilitano il controllo della posizione bucco-linguale rispetto alla fresatura per l'impianto.



Per maggiori dettagli e informazioni cliniche su LM Implant Misura MR, scansionare il codice QR e guardare il video.



Sceita della misura corretta

Gli strumenti sono disponibili in vari diametri. Ogni strumento ha una punta più larga per l'inserimento di impianti adiacenti e una punta più piccola per la spaziatura di un impianto da un elemento naturale.

Scegliere la misura dello strumento appropriata in base al diametro dell'impianto:

Colore dello strumento	Fresa iniziale Ø 1,5 mm Ø 2,0 mm		Distanza in mm	
	Impianto Ø		Dente — Impianto	Impianto — Impianto
Grigio	3.4-3.5	4.0	3.0	5.0
Verde	3.75	4.25	3.1	5.3
Giallo	4.0-4.1-4.15	4.6	3.3	5.6
Arancio	4.3	4.8	3.4	5.8
Blu	4.8-4.85	5.35	3.7	6.3



Kit LM Implant Misura MR

LMErgoSense LM 6843 ES

Disponibili in vari diametri



LM Implant Misura MR 3.0-5.0 **LMErgoSense** LM 400-401 ES



LM Implant Misura MR 3.1-5.3 **LMErgoSense** LM 402-403 ES



LM Implant Misura MR 3.3-5.6 **LMErgoSense** LM 404-405 ES



LM Implant Misura MR 3.4-5.8 **LMErgoSense** LM 406-407 ES



LM Implant Misura MR 3.7-6.3 **LMErgoSense** LM 408-409 ES



LMDental

LM-Instruments Oy
Norbyntantie 8
FI-21600 Parainen, Finland
Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com