

LM Implant Misura MR

LM

feel the
difference




STYLEITALIANO

Optimal implantatinsättning

Vägledning för korrekt mesio-distal implantatinsättning


LM Implant Misura MR-instrumenten hjälper till att placera den första spiralborren på korrekt avstånd från implantat eller naturlig tand intill implantatet med hänsyn till benstrukturen.

Detta medför korrekt benmängd mellan implantatet och tanden, så att benkammen förblir stabil under lång tid. När hänsyn tas till benstruktur och tillräckliga avstånd läggs grunden till ett estetiskt resultat som varar länge.

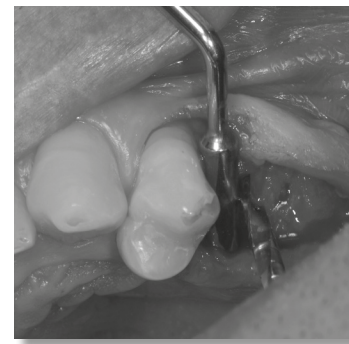


Kliniskt fall 1: Implantat intill en naturlig tand

- Välj rätt storlek på instrumentet med hänsyn till det implantat som sätts in
- Luta den cylindriska spetsen med ett fast grepp (undvik rörelser) mot den naturliga tandens rot intill implantatet
- Försäkra dig om att instrumentets spets lutar mot roten och inte mot kammen på det proximala benet
- Luta den första borren mot den cylindriska spetsen och kontrollera både den mesio-distala lutningen och att den bucco-linguala positionen är korrekt
- En icke exakt mesio-distal lutning kan orsaka en ökning eller en minskning av avståndet mellan implantatet och tanden
- Efter den första osteotomin, fortsätt att följa det normala implantationsprotokollet

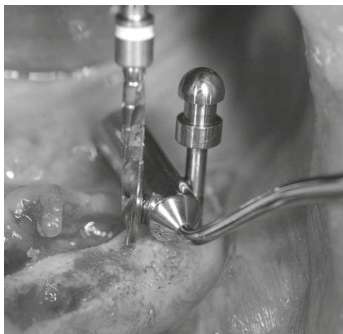

Kliniskt fall 2: Implantat intill ett annat implantat i tandlös käke

- Utför endast den första osteotomin (i allmänhet den mest distala) med den första borsten
- Sätt in ett stift som har samma diameter som den första borsten i osteotomin
- Luta det valda Implant Misura-instrumentet mot stiftet och var noga med att inte flytta det genom för stort tryck
- Utför den andra osteotomin med den första borsten
- Kontrollera alltid att borsten är korrekt placerad både vad beträffar den bucco-linguala riktningen och den mesio-distala lutningen
- Fortsätt att följa det normala implantationsprotokollet

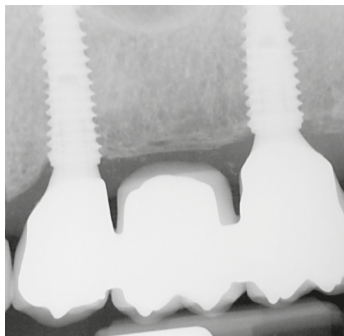

Kliniskt fall 3: Implantat intill ett annat implantat i delvis tandlös käke

- Börja alltid från implantatet intill den naturliga tanden
- Fortsätt enligt punkt 2

LM Implant Misura MR

by Style Italiano



Instrumenten är designade av Marco Redemagni MD, DDS. Style Italiano är en grupp passionerade tandläkare och forskare specialiserade på estetisk restaurativ tandvård.

Mer information på www.styleitaliano.org och www.facebook.com/styleitaliano.



"Dessa instrument är verkligen oundgängliga när det gäller att positionera den första borsten"

Marco Redemagni MD, DDS

Markeringar på spetsen underlättar kontroll av det bucco-linguala läget på implantatborrningen.



För ytterligare detaljer och klinisk information om LM Implant Misura MR, skanna QR och se på videon.



Att välja korrekt storlek

Instrumenten finns tillgängliga med olika diametrar. Varje instrument har en bredare spets för insättning av intelliggande implantat och en mindre spets för att skapa distans mellan ett implantat och en naturlig tand.

Välj rätt instrumentstorlek enligt implantatets diameter:

Instrument Färg	Första borrar Ø 1,5 mm Ø 2,0 mm		Avstånd in mm	
	Implantat Ø		Tand — Implantat	Implantat — Implantat
Grå	3,4-3,5	4,0	3,0	5,0
Grön	3,75	4,25	3,1	5,3
Gul	4,0-4,1-4,15	4,6	3,3	5,6
Orange	4,3	4,8	3,4	5,8
Blå	4,8-4,85	5,35	3,7	6,3



LM Implant Misura MR Kit
LMergoSense LM 6843 ES

Tillgängliga med olika diametrar



LM Implant Misura MR 3,0-5,0 LMergoSense LM 400-401 ES



LM Implant Misura MR 3,1-5,3 LMergoSense LM 402-403 ES



LM Implant Misura MR 3,3-5,6 LMergoSense LM 404-405 ES



LM Implant Misura MR 3,4-5,8 LMergoSense LM 406-407 ES



LM Implant Misura MR 3,7-6,3 LMergoSense LM 408-409 ES



LMDental
LM-Instruments Oy
Norrbym rantatie 8
FI-21600 Parainen, Finland
Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com