

LM-ProPower CombiLED QuickGuide


LM

feel the
difference

DVD: 

Appareil à ultrasons

Pour **mettre le détartreur en service**, appuyez sur la touche **S** et après choisissez le mode de fonctionnement recommandé indiqué sur chaque insert:

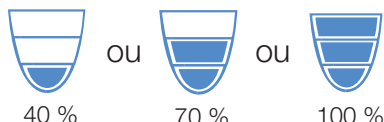

En appuyant à plusieurs reprises sur **S**, il est possible d'alterner entre:

1. Détartrage normal avec de l'eau
2. Mode sec: détartrage sans eau
3. Mode irrigation: seul de l'eau, pas de vibration

Régulation de l'eau

Appuyez à l'extrême gauche sur la pédale de commande. Ajustez le débit d'eau au moyen de la bague de la pièce à main jusqu'à ce que l'eau tombe goutte à goutte de l'insert.

Le détartreur est **activé**, quand on presse sur la pédale de commande. La puissance peut être réglée du gauche/ZERO au droite/MAX dans le cadre d'un mode de fonctionnement choisi.

Notez bien que **dans la position ZERO** il y a deux fonctions:




- a) seulement irrigation, pas d'ultrasons: Pressez la pédale de commande en bas
- b) lumière diagnostique: une pression sur la pédale.

Fonction nettoyage automatique:

Eteignez le détartreur en appuyant sur la touche **S** pendant quelques secondes. Maintenant vous pouvez activer la fonction nettoyage en appuyant d'abord sur **C** et ensuite sur **S**. L'eau/désinfectant nettoie la ligne d'eau et la pièce à main. Le cycle de nettoyage s'arrête automatiquement après **80 secondes**.

Pour mettre le détartreur hors service, appuyez sur la touche **S** pendant 3 secondes.

L'appareil est **dans la position de veille**, quand le cordon d'alimentation électrique est raccordé, et la lumière LED verte est allumée.

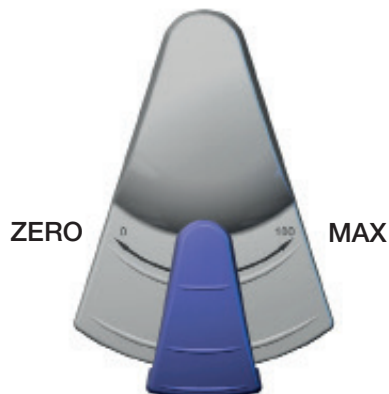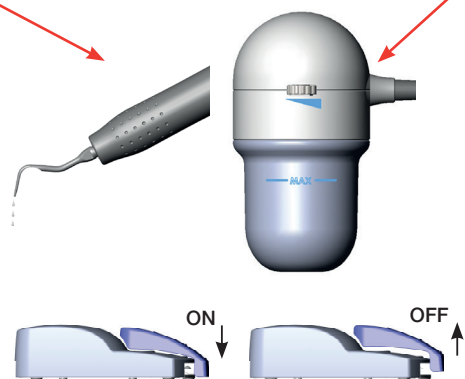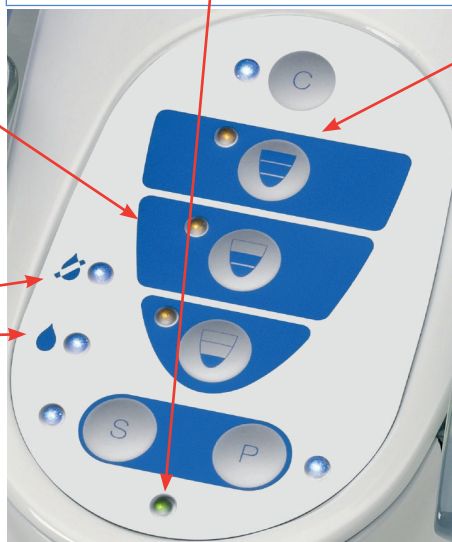

Polisseur à air

Pour **mettre le polisseur en service**, appuyez sur la touche **P** et après choisissez le mode de fonctionnement:



Le mode de fonctionnement ne peut pas être activé.

En appuyant à plusieurs reprises sur **P**, il est possible d'alterner entre:

1. Polissage normal
2. Air-Blow, nettoyage avec de l'air
3. Jet d'eau, nettoyage avec de l'eau et de l'air

Régulation de l'eau

Appuyez sur la pédale de commande et réduisez progressivement le débit d'eau au moyen du régulateur à côté du réservoir à poudre jusqu'au moment où la poudre commence à s'accumuler en tache blanche à la surface. Augmentez le débit d'eau jusqu'à disparition de la tache. Dès lors, le polisseur à air est équilibré pour une performance optimale.

Le polisseur est **activé**, quand on presse sur la pédale de commande. La puissance peut être réglée du gauche/ZERO = Jet d'eau (seuls de l'eau et de l'air) milieu = 60% au droite/MAX = 60% ou 100% dans le cadre d'un mode de fonctionnement choisi.

Fonction nettoyage rapide, la purge à l'air:

IMPORTANT ! Pour prévenir des grumeaux purgez la pièce à main à l'air après chaque traitement. Appuyez sur **C**, le polisseur étant en mode actif.

Fonction nettoyage automatique:



Eteignez le polisseur en appuyant sur la touche **P** pendant quelques secondes. Maintenant vous pouvez activer la fonction nettoyage en appuyant d'abord sur **C** et ensuite sur **P**. L'eau/désinfectant (40 sec) et l'air (40 sec) nettoie la pièce à main. Le cycle de nettoyage s'arrête automatiquement après **80 secondes**.

Pour mettre le polisseur hors service, appuyez sur la touche **P** pendant 3 secondes.




Installation LM-ProPower CombiLED

Notez bien! Lisez le manuel avant d'installer et utiliser l'appareil.



1. Consultez un technicien qualifié pour raccorder l'unité à la source d'alimentation en air et, en cas applicable, à la source d'alimentation en eau.
2. Connectez le câble de pédale à la pédale de commande et à l'arrière de l'appareil.
3. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil et à la prise de courant.

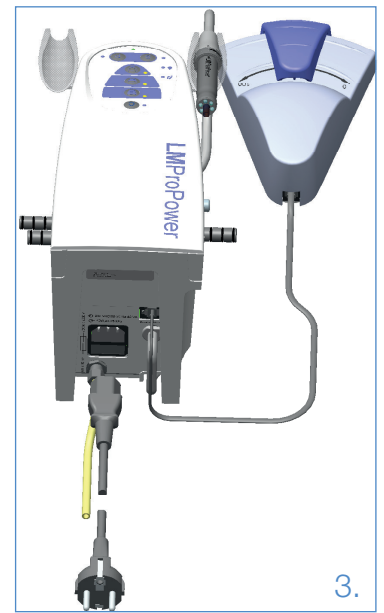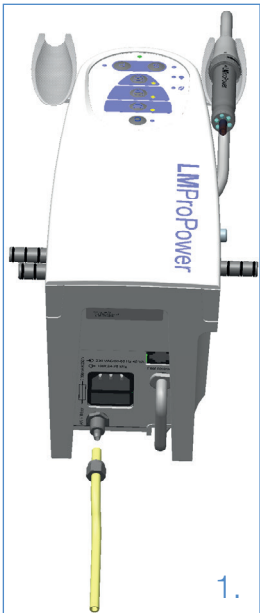

4. Remplissez la bouteille à médicament avec de l'eau ou une solution médicamenteuse, vissez le raccord de bouteille sur celle-ci et introduisez-le dans le connecteur au gauche.
5. a. Dévissez le réservoir à poudre de son couvercle et remplissez-le à maximum (MAX) avec le poudre LM-ProPower. Revissez le réservoir à son couvercle.
5. b. Raccordez le réservoir à poudre aux connecteurs sur le côté droit de l'appareil.

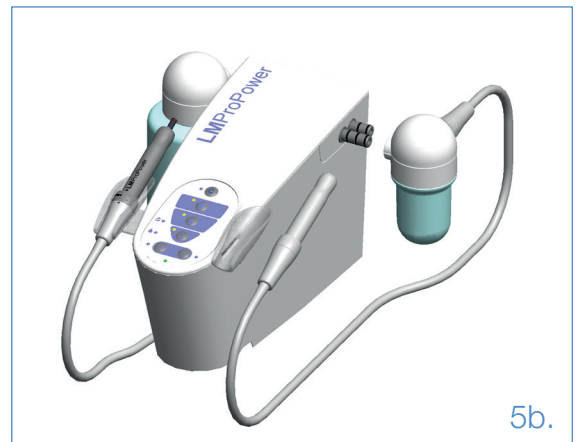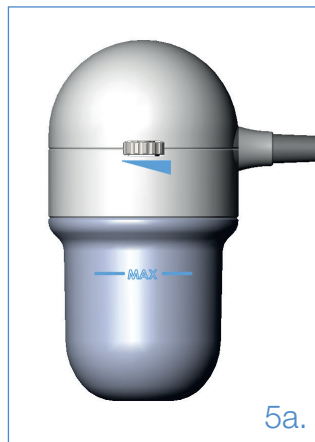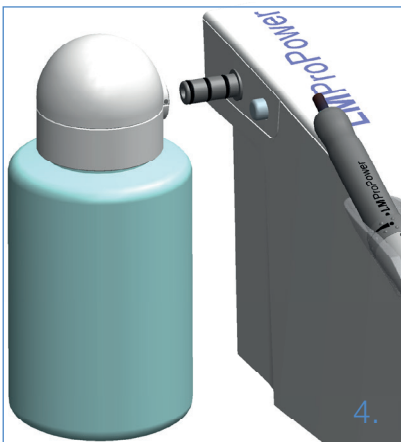

6. a. Glissez l'ErgoGrip doucement sur la pièce à main du polisseur. Vissez la buse du polisseur dans la pièce à main jusqu'à ce qu'elle soit fermement serrée.
6. b. Glissez l'ErgoGrip doucement sur la pièce à main du détartreur. Placez l'insert dans la clé dynamométrique et utilisez-la pour visser l'insert dans le sens des aiguilles d'une montre sur la pièce à main du détartreur. Serrez jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance et que la clé glisse.

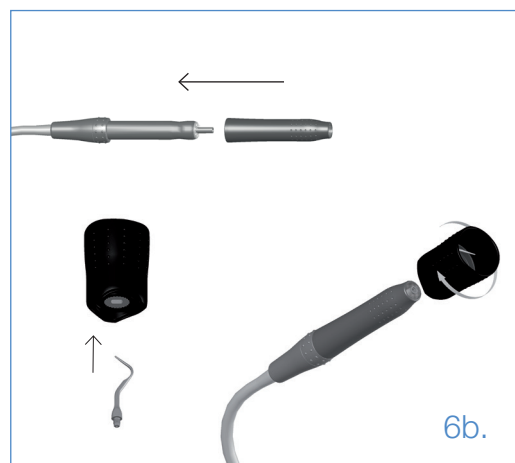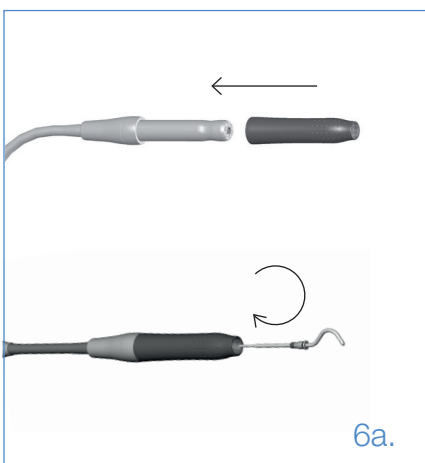

7. Voir **Instructions d'utilisation** dans le manuel.



LM Dental
LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8
FI-21600 Parainen
Finland
+358 2 4546 400
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com

0517_9770398E