

LMDualGracey™

LM

feel the
difference

EINFACH CLEVER



LMSharpDiamond™

NICHT ZU SCHLEIFENDE MIKROBESCHICHTUNG

LM Syntette™, die Geschichte hinter der ORIGINAL Dual Gracey-Kürette

LM™-INNOVATION

Ende der 70er Jahre fand der schwedische Zahnarzt Leif Ericsson, Leiter der Parodontal-Abteilung im Västervik-Krankenhaus in Schweden, dass bei Zahnbehandlungen zu viele und zu komplizierte Instrumente verwendet wurden. „Kann man die Auswahl nicht einfacher gestalten und ein vielseitigeres Instrument verwenden?“, dachte er.

Die Gracey-Küretten 11/12 für mesiale Oberflächen und 13/14 für distale Oberflächen waren sehr beliebte Instrumente, aber die Zahnärzte mussten bei der Behandlung des interproximalen Raums zwischen den beiden hin- und herwechseln. Dr. Ericsson analysierte das Design und die Funktion dieser beiden Graceys und entwickelte die innovative Idee, sie in einem Instrument zu kombinieren: eine Synthese aus zwei Küretten, also eine Syntette™!

Diese Idee wurde zu einer Skizze auf Papier, die jedoch in einer Schublade verschwand, und wurde einige Jahre nicht weiterverfolgt.

EINE BEGEGNUNG IM ZUG

In den 80er Jahren stand Dr. Ericsson auf dem Rückweg von einer Konferenz für Zahnmediziner in einem überfüllten Pendlerzug in Stockholm. Der Mann neben ihm war zufällig der finnische Zahnarzt Pekka Kangasniemi, der Gründer von LM-Dental™. Sie sprachen über die Idee einer doppelseitigen Gracey-Kürette, einem universell einsetzbaren Instrument. So entstand das Konzept der Syntette™.

EINFACH CLEVER!

Die neue Syntette™ Anterior vervollständigt jetzt das Sortiment von LM Dual Graceys™.



LM Dual Gracey™ für EINE EINFACHE INSTRUMENTENAUSWAHL

LM Dual Gracey™ kombiniert die Vorteile einer Universalkürette und einer Gracey-Kürette in einem Instrument. Diese Instrumente wurden für die Entfernung von supra- und subgingivalen Belägen von allen Zahnflächen entwickelt. Durch die Kombination von Gracey-Küretten mit Universalküretten ermöglicht das LM Dual Gracey™-Konzept die Verwendung von weniger Instrumenten. Das traditionelle Set von vier Graceys kann durch nur zwei LM Dual Gracey™-Instrumente ersetzt werden: Syntette™ und Syntette™ Anterior.

EINFACH CLEVERES DESIGN DER SPITZE

Jede LM Dual Gracey™-Spitze hat zwei elliptische Schneidekanten – eine mesiale und eine distale. Dieses Design ermöglicht die Behandlung sowohl mesialer als auch distaler Zahnflächen. Der untere Schaft wird bei Zahnsteinentfernung parallel zur Zahnfläche gehalten, was insbesondere bei subgingivalem Arbeiten von Vorteil ist. LM Dual Graceys™ eignen sich für Vertikal- und Horizontaltechniken sowie auch für konkave und konvexe Flächen.

KOMBINIERT VORTEILE: EINZIGARTIGE SPITZE, ERGONOMISCHER GRIFF UND NICHT ZU SCHLEIFENDE BESCHICHTUNG

Die doppelseitigen Gracey-Spitzen bieten eine universelle Anpassung, einen schnellen und einfachen Wechsel von einem Zahn zum Anderen während einer klinische Behandlung. Die LM-ErgoSense®-Griffe aus medizinischem Silikon bieten höchste Ergonomie, liegen sicher und komfortabel in der Hand und überzeugen mit einem verbesserten Tastempfinden.

Dank der LM Sharp Diamond™-Technologie kann auf das Schleifen völlig verzichtet werden.



Liegt
ausgezeichnet
in der Hand.“

LM-ErgoSense® hat in Studien des Finnischen Instituts für Arbeitsmedizin die höchste Bewertung für Ergonomie erhalten.



LM Sharp Diamond™ ohne Schleifen


Es ist toll, dass ich meine Zeit nicht mehr mit Schleifen verschwenden muss! Da die LM Sharp Diamond™-Instrumente nicht geschliffen werden müssen, kann ich mich auf die klinische Arbeit konzentrieren. Die langanhaltende Schärfe macht wirklich einen Unterschied!“


Anna, Diplom-Dentalhygienikerin, USA




Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen zur nicht zu schleifenden Beschichtung auf www.lm-dental.com/SharpDiamond zu erhalten

Empfehlungen für eine optimale Behandlung

 Syntette™ Anterior
bzw.
Mini Syntette™ Anterior

 Syntette™
bzw.
Mini Syntette™

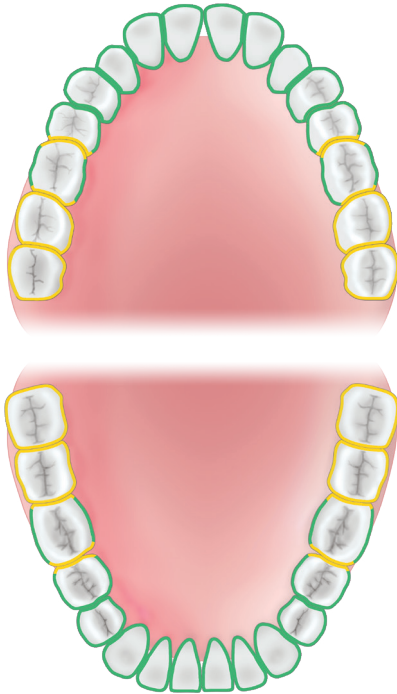

LM Dual Gracey™-Instrumente

- Die originale LM Dual Gracey™-Kürette, eine Kombination aus einer Universalkürette sowie den Gracey-Küretten 11/12 und 13/14
- Zur Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnstein im Prämolaren- und Molarenbereich
- Für alle Zahnoberflächen
- Für alle Zahnoberflächen
- Das Mini-Modell eignet sich hervorragend für schmale und tiefe Taschen



Syntette™



LM Sharp Diamond™ OHNE SCHLEIFEN

Unbeschichtet/kann geschliffen werden

 215-216SDES

 215-216ES

 215-216XSI

 215-216SI



Mini Syntette™



LM Sharp Diamond™ OHNE SCHLEIFEN

Unbeschichtet/kann geschliffen werden

 215-216MSDES

 215-216MES

 215-216MXSI

 215-216MSI

NEU

- LM Dual Gracey™-Kürette, eine Kombination aus einer Universalkürette sowie den Gracey-Küretten 1/2 und 7/8
- Zur Entfernung von supra- und subgingivalen Belägen im Front- und Prämolarenbereich
- Für alle Zahnoberflächen
- Das Mini-Modell eignet sich hervorragend für schmale und tiefe Taschen



Syntette™ Anterior

 **LM Sharp Diamond™ OHNE SCHLEIFEN**

LMErgoSense® 275-276SDES




Mini Syntette™ Anterior

 **LM Sharp Diamond™ OHNE SCHLEIFEN**

LMErgoSense® 275-276MSDES



LM Dual Gracey™-
Instrumente haben eine
abgerundete Spitze mit zwei
Schneidekanten.

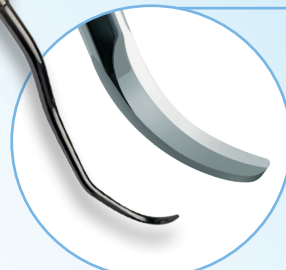

Scannen Sie den
QR-Code, um weitere
Informationen zu
erhalten und
dieses Video auf
[www.lm-dental.com/
DualGracey](http://www.lm-dental.com/DualGracey) anzusehen



Griffauswahl

LMErgoSense®



Der größere Durchmesser und das Design bieten einen hervorragenden Griff, der sich in wissenschaftlichen klinischen Studien als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Einzigartig intelligenter Griff mit RFID-Option – mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.dentaltracking.com. Ø 13,7 mm

LMErgoMax™



Klassisches ergonomisches Design, das in allen klinischen Verfahren gut funktioniert und ein hervorragendes Tastempfinden garantiert. Ø 11,5 mm

LMErgoNorm™



Der dünnere Griff, der bei leichten klinischen Eingriffen am besten funktioniert. Ø 8,5 mm

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

