

LMDualGracey™

LM

feel the
difference

SENCILLAMENTE BRILLANTE



LMSharpDiamond™

REVESTIMIENTOSIN NECESIDAD DE AFILADO

LM Syntette™, la historia de la cureta Dual Gracey ORIGINAL

INNOVACIÓN LM™

A finales de la década de los setenta, la cantidad y la complejidad de los instrumentos utilizados en los tratamientos periodontales suponían un inconveniente para el odontólogo sueco Leif Ericsson, jefe de la Unidad de Periodoncia del Hospital de Västervik, en Suecia. Se preguntaba *si podría existir un instrumento más versátil y que ofreciera una alternativa más sencilla.*

Aunque las curetas Gracey 11/12 para superficies mesiales y Gracey 13/14 para superficies distales eran muy populares, a la hora de tratar un espacio interproximal era necesario alternar ambos instrumentos. El Dr. Ericsson analizó el diseño y la función de estas dos curetas Graceys y tuvo la innovadora idea de combinarlas en un único instrumento: una síntesis de dos curetas que denominó Syntette™.

Bosquejó la idea en un papel, que guardó en un cajón durante unos años junto a su promesa incumplida.

ENCUENTRO EN EL TREN

En la década de los ochenta, el Dr. Ericsson volvía de un congreso de odontología en un tren de cercanías de Estocolmo. El hombre que viajaba a su lado resultó ser el odontólogo finlandés Pekka Kangasniemi, fundador de LM-Dental™. Comenzaron a discutir la idea de una cureta Gracey con dos bordes, un instrumento verdaderamente universal. Fue así como nació la cureta Syntette™.

¡SENCILLAMENTE BRILLANTE!

Ahora la historia continúa con Syntette™ Anterior, que completa el juego de curetas LM Dual Gracey™.



LM Dual Gracey™ para un INSTRUMENTAL SENCILLO

La cureta LM Dual Gracey™ combina las ventajas de una cureta universal y una cureta Gracey. Estos instrumentos se han diseñado para eliminar el cálculo supragingival y subgingival de todas las superficies dentales. El concepto LM Dual Gracey™, que combina la cureta Gracey con la cureta universal, permite utilizar un menor número de instrumentos. El clásico juego de cuatro curetas Gracey puede sustituirse por solo dos instrumentos LM Dual Gracey™ Syntette™ y Syntette™ Anterior.

DISEÑO DE PUNTA SENCILLAMENTE BRILLANTE

Cada una de las puntas de la cureta LM Dual Gracey™ presenta dos bordes de corte elípticos, uno mesial y otro distal. Este diseño permite tratar superficies tanto mesiales como distales. La caña inferior se mantiene paralela a la superficie dental durante el raspado, lo que es de gran ayuda a la hora de tratar la región subgingival. Las curetas LM Dual Gracey™ son aptas para técnicas de raspado vertical, horizontal y oblicuo.

COMBINACIÓN DE VENTAJAS: UNA PUNTA ÚNICA, UN AGARRE ERGONÓMICO Y UN REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO

Las puntas con dos bordes de las curetas Gracey ofrecen una adaptación universal y permiten pasar de un diente a otro de forma rápida y fácil durante la intervención. El mango de silicona de grado médico LM-ErgoSense® ofrece una ergonomía óptima, un agarre seguro y cómodo, así como una sensibilidad táctil mejorada. La tecnología LM Sharp Diamond™ crea instrumentos sin necesidad alguna de afilado.



Un agarre
extraordinaria-
mente cómodo».

Estudios dirigidos por el Instituto Finlandés de Seguridad Laboral han revelado que LM-ErgoSense® presenta una ergonomía óptima.



LM Sharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO

¡Es genial no tener que perder el tiempo afilando instrumental! Gracias a los instrumentos LM Sharp Diamond™, que no precisan afilado, puedo concentrarme en el trabajo clínico. ¡El afilado de larga duración marca una gran diferencia!»

Anna, higienista dental certificada, EE. UU.



Escanee el código QR para obtener más información sobre el revestimiento sin necesidad de afilado en www.lm-dental.com/SharpDiamond

Recomendaciones para un tratamiento óptimo



Syntette™ Anterior

o


Mini Syntette™ Anterior



Syntette™

o

Mini Syntette™

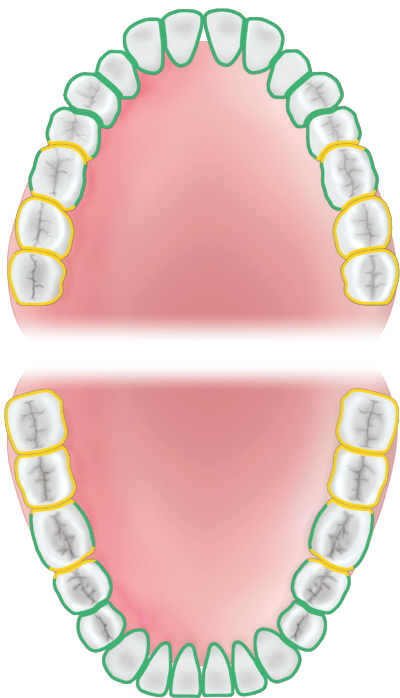

Instrumentos **LM**DualGracey™

- La cureta LM Dual Gracey™ original, una combinación de la cureta universal y las curetas Gracey 11/12 y Gracey 13/14
- Para la eliminación del cálculo supragingival y subgingival en las regiones premolares y molares
- Para todas las superficies dentales
- El modelo Mini es ideal para tratar bolsas estrechas y profundas



Syntette™



LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO Sin revestimiento/se puede volver a afilar

LMErgoSense® 215-216SDES

LMErgoSense® 215-216ES

LMErgoMax™ 215-216XSI

LMErgoNorm™ 215-216SI



Mini Syntette™



LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO Sin revestimiento/se puede volver a afilar

LMErgoSense® 215-216MSDES

LMErgoSense® 215-216MES

LMErgoMax™ 215-216MXSI

LMErgoNorm™ 215-216MSI

NOVEDADES

- Cureta LM Dual Gracey™, una combinación de cureta universal y las curetas de acabado Gracey 1/2 y Gracey 7/8
- Para la eliminación del cálculo supragingival y subgingival en las regiones anteriores y premolares
- Para todas las superficies dentales
- El modelo Mini es ideal para tratar bolsas estrechas y profundas



Syntette™ Anterior

 **LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFLADO**

LMErgoSense® 275-276SDES




Mini Syntette™ Anterior

 **LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFLADO**

LMErgoSense® 275-276MSDES

Los instrumentos LM Dual Gracey™ tienen la punta redondeada y dos bordes de corte.

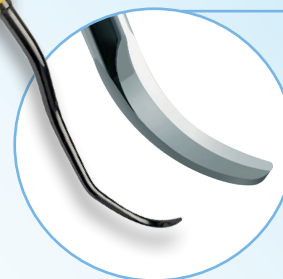

Escanee el código QR para obtener más información y ver el vídeo en www.lm-dental.com/DualGracey



Opciones de mango

LMErgoSense®



Su mayor diámetro y su diseño proporcionan un agarre sensacional, cuya ergonomía y eficiencia se han comprobado mediante pruebas científicas clínicas. Mango excepcionalmente inteligente con opción de etiquetado RFID (para obtener más información, visite www.dentaltracking.com). Ø 13,7 mm

LMErgoMax™



Su diseño ergonómico clásico es apto para todas las intervenciones clínicas y garantiza una excelente sensibilidad táctil. Ø 11,5 mm

LMErgoNorm™



El mango más fino que mejor funciona en intervenciones clínicas delicadas. Ø 8,5 mm

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

