

LMDualGracey™

LM

feel the
difference

ENKELT OCH GENIALISKT



LMSharpDiamond™

SLIPFRI BELÄGGNING

Historien om LMSyntette™, den URSPRUNGLIGA Dual Gracey

LM™-INNOVATION

I slutet av 70-talet såg den svenske tandläkaren Leif Ericsson, chef för parodontologiska avdelningen på Västerviks sjukhus, ett problem med antalet och komplexiteten i de instrument som användes vid parodontologiska behandlingar. *Skulle det inte vara möjligt att ha ett enklare val och ett mer mångsidigt instrument?* undrade han.

Gracey 11/12 för mesialytor och Gracey 13/14 för distalytor var mycket populära instrument, men det var nödvändigt att växla mellan dem vid behandling av ett interdentalrum. Leif Ericsson analyserade de båda Gracey-instrumentens utformning och funktion, och fick den innovativa idén att kombinera dem i ett enda instrument. En syntes av två kyretter – en Syntette™!

Idén blev till en skiss på ett papper, som hamnade i en låda och blev liggande under några år.

MÖTE PÅ TÅGET

På 80-talet befann han sig i trängseln på ett pendeltåg i Stockholm på väg tillbaka från en tandläkarkonferens. Av en slump hamnade han bredvid Pekka Kangasniemi, finsk tandläkare och grundare av LM-Dental™. De började prata om idén med en dubbelsidig Gracey, ett verkligt universalinstrument, och Syntette™ var född.

ENKELT OCH GENIALISKT!

Historien får nu en fortsättning i Syntette™ Anterior, som kompletterar uppsättningen LM Dual Graceys™.



LM Dual Gracey™ för ENKEL INSTRUMENTERING

LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett och samma instrument. De här instrumenten är utformade för borttagning av supra- och subgingival tandsten från alla tandtyper. Tack vare LM Dual Gracey™-konceptet, som kombinerar Gracey-kyrretter med universalkyrretter, krävs färre instrument. Den traditionella uppsättningen av fyra Gracey-instrument kan ersättas av endast två LM Dual Gracey™-instrument: Syntette™ och Syntette™ Anterior.

ENKEL OCH GENIALISK SPETSDESIGN

Varje LM Dual Gracey™-spets har två elliptiska skärande eggar – en mesial och en distal egg. Denna design möjliggör behandling av både mesiala och distala tandtyper. Den nedre halsen hålls parallellt med tandytan vid borttagning, vilket är särskilt praktiskt vid subgingival åtkomst. LM Dual Graceys™ lämpar sig för vertikal, horisontell och diagonal borttagningsteknik.

KOMBINERADE FÖRDELAR: UNIK SPETS, ERGONOMISKT GREPP OCH SLIPFRI BELÄGGNING

Dubbelsidiga Gracey-spetsar ger universalanpassning och snabba, enkla övergångar från tand till tand under ett klinikbesök. LM-ErgoSense® skaftet av medicinklassad silikon har ett säkert, bekvämt grepp, förhöjd taktil känsla och en ergonomi som rankas som den bästa. LM Sharp Diamond™-tekniken ger helt slipfria instrument.

”

Känns fantastiskt
i handen.”

LM-ErgoSense® ergonomi rankades som den bästa i studier utförda av finska arbetshälsainstitutet.



”

LM Sharp Diamond™ SLIPFRI

Det är fantastiskt att jag inte längre behöver använda min tid till slipning! Eftersom LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria kan jag fokusera på det kliniska arbetet. Den långvariga skärpan gör verkligen skillnad!”

Anna, legitimerad tandhygienist, USA



Skanna QR-koden för mer information om slipfri beläggning på www.lm-dental.com/SharpDiamond


Rekommendationer för optimal behandling



Syntette™ Anterior
och/eller
Mini Syntette™ Anterior



Syntette™
och/eller
Mini Syntette™

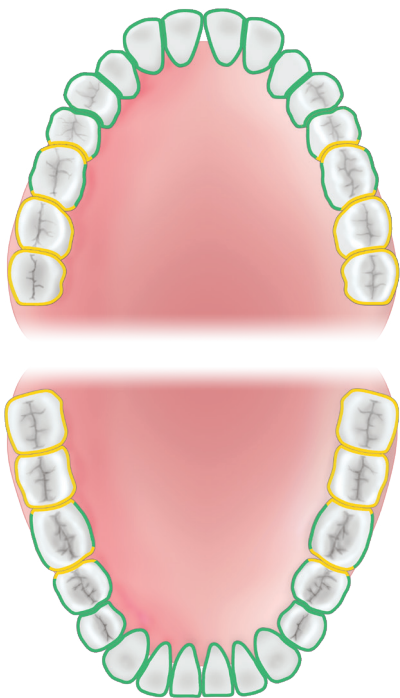

LMDualGracey™-instrument

- Den ursprungliga LM Dual Gracey™-kyretten, är en kombination av en universalkyrett och Gracey-kyretterna 11/12 och 13/14
- För borttagning av supra- och subgingival tandsten i premolar- och molarområden
- För alla tandtyper
- Mini-modellen är suverän för trånga och djupa fickor



Syntette™



LMSharp Diamond™ SLIPFRI

Utan beläggning/kan slipas

LMErgoSense® 215-216SDES

LMErgoSense® 215-216ES

LMErgoMax™ 215-216XSI

LMErgoNorm™ 215-216SI



Mini Syntette™



LMSharp Diamond™ SLIPFRI

Utan beläggning/kan slipas

LMErgoSense® 215-216MSDES

LMErgoSense® 215-216MES

LMErgoMax™ 215-216MXSI

LMErgoNorm™ 215-216MSI

NYHET

- LM Dual Gracey™, en kombination av en universalkyrett och Gracey-kyrreterna 1/2 och 7/8
- För borttagning av supra- och subgingival tandsten i anteriora- och premolarområden
- För alla tandtyper
- Mini-modellen är suverän för trånga och djupa fickor



Syntette™ Anterior

 LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense® 275-276SDES



Mini Syntette™ Anterior

 LMSharp Diamond™ SLIPFRI

LMErgoSense® 275-276MSDES



LM Dual Gracey™-
instrumenten har rundad spets
med två skärande eggar.

Skanna QR-koden för
mer information och video på
[www.lm-dental.com/
DualGracey](http://www.lm-dental.com/DualGracey)



Val av skaft

LMErgoSense®



Den större diametern och utformningen ger ett utomordentligt grepp som har visat sig vara både ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent skaft med möjlighet till RFID-märkning – se mer på www.dentaltracking.com. Ø 13,7 mm

LMErgoMax™



Klassisk ergonomisk utformning som fungerar väl i alla kliniska behandlingar och säkerställer utmärkt taktil känsla. Ø 11,5 mm

LMErgoNorm™



Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar. Ø 8,5 mm

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

