

LM™ Extraction

LM

feel the
difference



Puhtia & pitoa poistoihin

LM LiftOut™

LM LiftOut™

Luksointi-instrumentit atraumaattisiin poistoihin

LM-LiftOut™-instrumentin avulla hampaanpoisto voidaan suorittaa mahdollisimman atraumaattisesti. Tämä on tärkeää nopean paranemisen ja mahdollisen myöhemmän implantoinnin mahdollistamiseksi.


Instrumentin ohut kärki viedään parodontaalirakoon ja hivutetaan kohti juuren apikaalista osaa, samalla edestakaisin hellävaroen kiertäen.

LM-LiftOut™ ei sovellu vipuamiseen.




Taivutukset ja koot

Suora

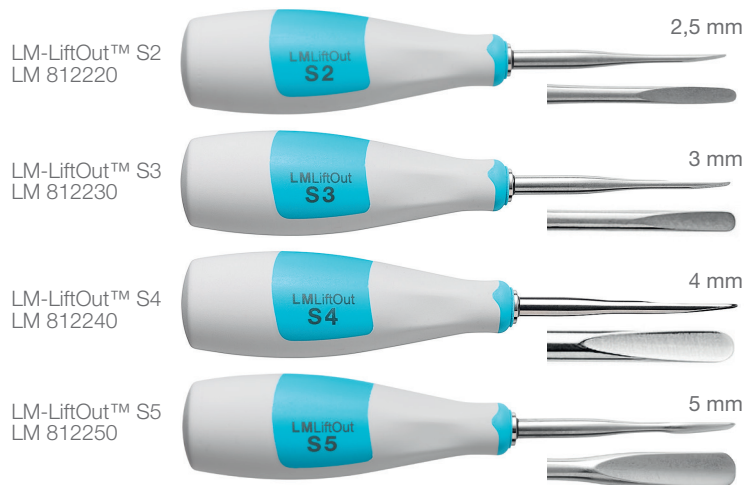

Taivutettu

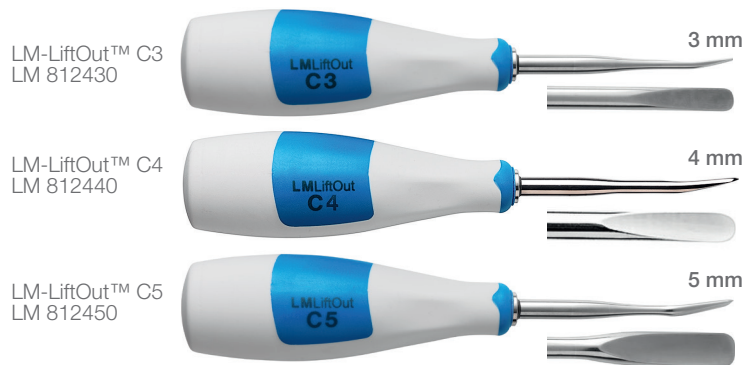

Puhtia ja pitoa poistoihin sekä atraumaattinen luksointi

Tuttua LM™:n instrumenttiergonomiaa ja tuntoherkkyyttä poistoinstrumenteissa

LM™ ominaisuus	Hyöty
Ergonominen muotoilu	– istuu käteen & helppo pyörittää
Pitävä LM-ErgoTouch-pinta	– lipsumaton & kevyt ote
Hyvin tasapainotettu	– kontrolloitu ote
Kevyt	– vähentää käden rasitusta
Selkeä värikoodaus	– helppo tunnistaa
LM-DuraGradeMAX™-superteräs	– vahvat ja terävät työosat
Terän tiivis liitos	– hygieeninen



LM:n ekstraktioinstrumentit arvioitiin vuoden 2014 parhaaksi tuotteeksi.




Skannaa QR-koodi ja lue arviointi!

LM SlimLift™

Luksointi-instrumentit atraumaattiseen poistoon ahtaissa raoissa

LM-SlimLift™-luksointi-instrumentit on suunniteltu sopimaan erityisesti ahtaisiin paikkoihin joihin perinteisillä luksointi-instrumenteilla ei pääse. Tämä mahdollistaa atraumaattisen hampaanpoiston ja edesauttaa kudoksen nopeaa paranemista. Erittäin ohueksi muotoiltu instrumentin terä asetetaan kapeaan parodontaalirakoon ja hitaasti hivutetaan kohti juuren kärkeä edestakaisella liikkeellä. LM-SlimLift™ ei sovellu vipumaiseen.

Terän erittäin ohut muotoilu mahdollistaa mitä atraumaattisimmat poistot.

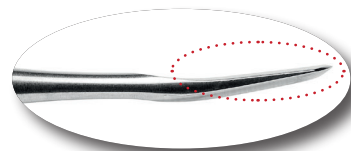

Ohuet LM-SlimLift™ -instrumentit – oikeasti atraumaattisempi ratkaisu

Suukirurgian EHL, LL, LKT
Peter Jungnell
Helsinki



"Käytän LM-SlimLift™-instrumentteja nykyään lähes kaikissa poistoissa. Rinnalla käytän vanhempia suosimiani luksointi-instrumenttejäni, mutta perinteisten heebeleiden käyttö on jäänyt vähemmälle.

LM™:n ohuen luksointi-instrumentin saa hyvin jopa erityisen ahtaisiin parodontaalirakoihin. Leveillä instrumenteilla luksoiva voima välittyy laajemmalle alueelle sivuille ja syväle juurten kärkeen päin, jolloin erityisesti hauraiden juurien murtumisriski pienenee huomattavasti. Suurin osa poistoista voidaan tehdä luksointi-instrumenteilla ilman, että tarvitaan muita operatiivisia toimenpiteitä.

LM-SlimLift™-instrumenttien kahvan muotoilu ja materiaali ovat sellaiset, että instrumentista

saa erinomaisen otteen. Ensikosketuksella kahvat tuntuivat jopa liian isoilta, mutta kliinisessä työssä olen jatkossa huomannut niiden sopivan erinomaisesti käteeni. Instrumenttia voi pitää joko kämmenellä tai vain sormien varassa. Laajasta kokovalikoimasta on helppo löytää sopiva instrumentti kliiniseen tarpeeseen. Leveät terät sopivat alomolaarien poistoon ja kapeat kärjet esimerkiksi ylähampaiden kapeiden juurien poistoon.

Voin suositella LM-SlimLift™-instrumentteja kaikille hammaslääkäreille: vanhoista ja huonosti toimivista instrumenteista ja vivuista kannattaa luopua kokonaan. Liian usein kuulee tapauksista, joissa juuren käsittely on kestänyt pitkälti toista tuntia."

Taivutukset ja koot

Suora

LM-SlimLift™ S3
LM 812630



3 mm

LM-SlimLift™ S4
LM 812640



4 mm

LM-SlimLift™ S5
LM 812650



5 mm

Taivutettu

LM-SlimLift™ C3
LM 812830



3 mm

LM-SlimLift™ C4
LM 812840



4 mm

LM-SlimLift™ C5
LM 812850



5 mm

LMTwistOut™

LMTwistOut™

Vivut kun tarvitset voimaa

LM-TwistOut™-instrumentti soveltuu hampaiden poistoon tilanteissa, joissa voimankäyttö ja vipuliikkeet ovat tarpeellisia.



"Tämä LM™:n vipu soveltuu erityisesti vääntövoimaa vaativiin toimenpiteisiin."

Bite Magazine, elokuu 2014
hammaslääkäri Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia

"Satuin huomaamaan tämän vipuinstrumentin hammaslääketieteellisessä kongressissa Australian Melbournessa viime vuonna. Koska toimimme maaseudulla, meillä tulee vastaan hampaanpoistoja todennäköisesti jonkin verran useammin kuin taajama-alueilla, ja tämä työkalu on erittäin kätevä.

Mielestäni luksointi-instrumentit ovat usein sironpuoleisia, ja ne taipuvat tai rikkoutuvat helposti, jos niihin kohdistuu vähänkään liikaa voimaa. Tämä LM™:n vipu soveltuu erityisesti vääntövoimaa vaativiin toimenpiteisiin.

Käytän hampaanpoistoihin aina tätä vipua, ja minulla on täydellinen sarja erikokoisia suoria ja taivutettuja malleja. Se on erittäin lujarakenteinen ja yksinkertainen työkalu, jonka avulla hampaanpoisto sujuu paljon helpommin.

Olin usein miettinyt, miksei markkinoilla ole tukevia luksointi-instrumentteja, mutta sainkin huomata, että tämä vipu oli juuri se, mitä olin etsinyt."

Taivutukset ja koot

Suora

LM-TwistOut™ S3
LM 814230



LM-TwistOut™ S4
LM 814240



LM-TwistOut™ S5
LM 814250



Taivutettu

LM-TwistOut™ C3
LM 814430



LM-TwistOut™ C4
LM 814440



LM-TwistOut™ C5
LM 814450



Kätevä huoltaa

Kasetti LM 810001

LM™-poistoinstrumentit toimitetaan kätevässä kasetissa, joka suojaa sekä instrumenttia että käsittelijää huolto-kierron aikana. Kasetissa steriloitu instrumentti ei puhko pussia ja pysyy näin varmemmin steriilinä. Kasetin voi värikoodata.

Teroituskivi LM 818002

LM-DuraGradeMax™-superteräksestä valmistetut ja käsin viimeistellyt terät pysyvät pitkään terävinä ja ovat oikein käytettynä ja huollettuna pitkäikäisiä. Teroita poistoinstrumentit silloin tällöin pyöreällä teroituskivellä. Se on yksinkertainen ja nopea tapa pitää ne parhaassa terässä ja aina käyttövalmiina.



Sirunpoistoinstrumentit

Root Tip Pick LM 769-771 XSI/ES

- Käy juurenkärjen ja -sirujen poistoon.
- Sopii hyvin vaikeasti ulotuttaviin paikkoihin.



LM-RootOut™ LM 812210

- Sopii hienovaraiseen juurensirun poistoon.
- Ei suositella käytettäväksi voimaa vaativiin juurensirujen poistoon.
- Muistuttaa Heidbrink-sirunpoistajaa.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva takaa pitävän otteen.

LMDental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

