

LM™ Extraction

LM

feel the
difference



Extraktion med ergonomi

LMliftOut™

LMliftOut™


Luxationsinstrument för atraumatisk extraktion

Med hjälp av LM-LiftOut™ kan extraktion av tänder ske så atraumatiskt som möjligt vilket ger en snabb läkning och underlättar vid en eventuell implantatbehandling. Den tunna spetsen på instrumentet förs in i det periodontala utrymmet och förs sedan långsamt mot rotens apex samtidigt som instrumentet vrids försiktigt fram och tillbaka. LM-LiftOut™ är inte avsett att användas som hävel.




Vinklar och storlekar

Rak

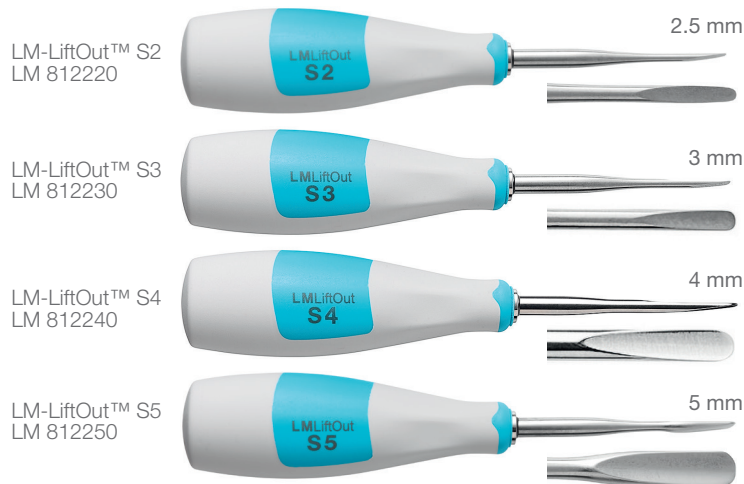

Krökt

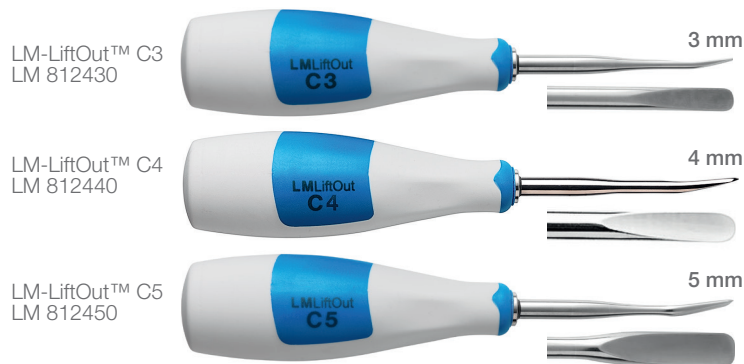

Extraktion med ergonomi och luxera atraumatiskt

Välkänd ergonomi och kvalitet från LM™ nu också i extraktionsinstrument

Egenskaper	Fördelar
Ergonomisk design	– bekväm att hålla i och enkel att vrida
LM-ErgoTouch-yta	– lätt, halkfritt grepp
Välbalanserad	– kontrollerat grepp
Låg vikt	– mindre belastning för händer
Tydlig färgkodning	– enkel identifiering
LM-DuraGradeMAX™ -superstål	– starka och skarpa blad
Tät skarv mellan skaft och blad	– hygieniskt



LM™s extraktionsinstrument erhöll utmärkelse som Bästa Produkt år 2014.




Skanna Qr-koden!

LM SlimLift™

Luxationsinstrument för ytterst smala parodontalspalter

LM-SlimLift-instrumenten är utvecklade för att skära ligament i periodontalspalter som är för trånga för att nå med konventionella luxationsinstrument. Den extremt tunna spetsen förs in i den smala parodontalspalten och förs sedan långsamt mot rotens apex samtidigt som instrumentet förs varsamt fram och tillbaka. Detta gör extraktionen så atraumatisk som möjligt vilket förkortar läkningstiden. LM-SlimLift™ är inte avsett att användas som hävel.

Med den extremt tunna spetsen görs extraktioner så atraumatiskt som möjligt

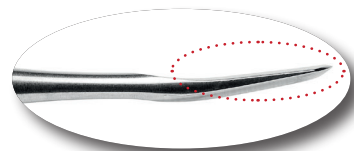

Tunna LM-SlimLift™-instrument - utan tvivel en mera atraumatisk lösning

Läkare, tandläkare, Doktor i medicinsk vetenskap, Oral kirurg, Peter Jungell
Helsingfors, Finland



“Jag använder nu LM-SlimLift™-instrumenten för nästan alla extraktioner. Jag använder också de luxationsinstrument som jag tidigare föredrog men jag använder de traditionella instrumenten mindre ofta.

LM™:s tunna luxationsinstrument kan även föras in i särskilt smala periodontalspalter. När breda instrument används sprids luxationskraften över ett bredare område mot sidorna och på djupet mot rotspetsarna så att risken för fraktur av särskilt de sköra rötterna, avsevärt begränsas. De flesta extraktioner kan utföras med luxationsinstrument utan att ytterligare åtgärder behövs

Utformningen av och materialet i LM-SlimLift™-instrumentet gör det möjligt att få ett utmärkt grepp om instrumentet. Första

gången kan handtagen till och med kännas för stora men i det kliniska arbetet har jag märkt att de passar handen perfekt. Instrumentet kan antingen hållas i handflatan eller endast med fingrarna. Det är lätt att välja ett passande instrument för alla kliniska behov från det breda urvalet av storlekar. De breda bladen är lämpliga för extraktion av molarerna i underkäken medan de smala spetsarna är perfekta till exempel för extraktion av de smala rötterna på tänderna i överkäken.

Jag kan rekommendera LM-SlimLift™-instrumenten för alla tandläkare: det är klokt att överge alla gamla instrument som inte fungerar optimalt. Man hör ofta om fall då behandlingen av roten har tagit nästan två timmar.”

Vinklar och storlekar

Rak

LM-SlimLift™ S3
LM 812630



3 mm

LM-SlimLift™ S4
LM 812640



4 mm

LM-SlimLift™ S5
LM 812650



5 mm

Krökt

LM-SlimLift™ C3
LM 812830



3 mm

LM-SlimLift™ C4
LM 812840



4 mm

LM-SlimLift™ C5
LM 812850



5 mm

LMTwistOut™

LMTwistOut™

Hävlar för extraktion med kraft

LM-TwistOut™ är avsedda för extraktion av tänder.
Instrumentet är bra att använda i situationer där det
behövs kraft och hävlingsrörelser.



*“Den här häveln från LM™
är särskilt utformad för
vridmoment-tillämpningar”*

Bite Magazine, augusti 2014
av Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australien

“Jag hittade den här häveln på den
australiensiska tandläkarkongressen i
Melbourne förra året. Eftersom vår mottagning
är belägen på lands bygden och vi troligen utför
flera tandutdragningar än vad som normalt
förekommer i en stad är det för oss ett mycket
praktiskt instrument.


Enligt min mening är luxatorer ofta för veka och
om för mycket tryck används kan de böjas eller
gå sönder. Den här häveln från LM™ är särskilt
utformad för vridmomenttillämpningar.

Jag använder den här häveln för alla extraktioner
och jag har hela uppsättningen av raka och vink-
lade modeller i alla storlekar. Det är ett mycket
stadigt och enkelt instrument som gör det
mycket lättare att utföra extraktioner.


Jag har ofta undrat varför det inte fanns en
stadigare luxator på marknaden, men nu förstår
jag att den här häveln var just det jag sökte efter.”

Vinklar och storlekar

Rak

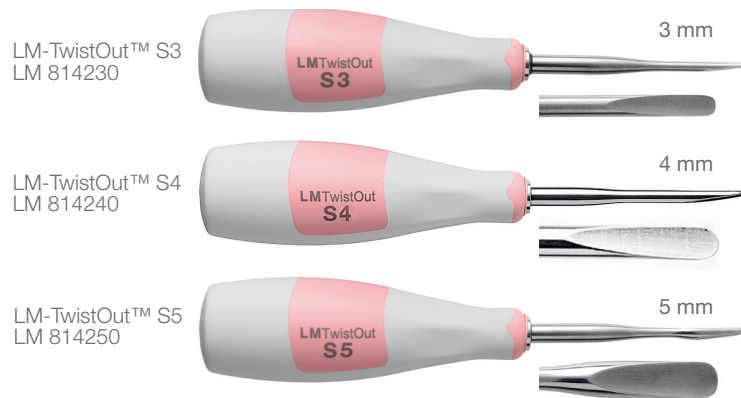

Krökt

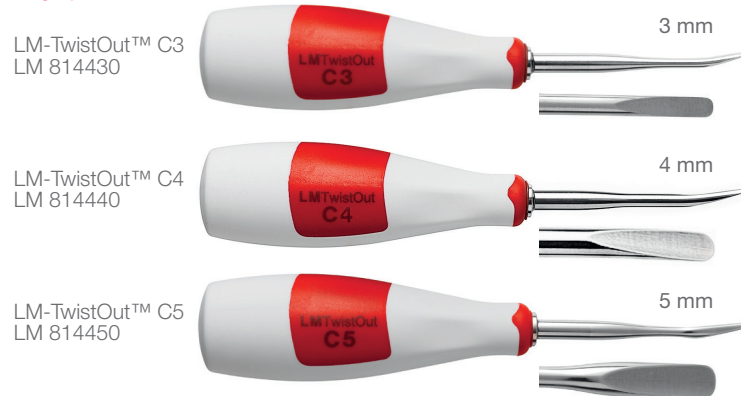

Enkelt underhåll

Kassett LM 810001

Instrumenten levereras i en praktisk kassett som skyddar både instrumentet och användaren vid underhåll. Kassetten förhindrar att instrumentet punkterar sterilipåsen. Kassetten kan färgkodas.

Slipsten LM 818002

Bladen, som är handgjorda och tillverkade i LM-DuraGradeMAX™-superstål, hålls skarpa och varar längre om de används och underhålls på rätt sätt. Vid behov slipas extraktionsinstrument snabbt och enkelt med LM:s runda slipsten.



Rotspetsinstrument

Root Tip Pick LM 769-771 XSI/ES

- rotspetsinstrument
- lämplig till svåråtkomliga områden



LM-RootOut™ LM 812210

- utvecklad för att varsamt få små rotrester ur alveolen
- rekommenderas inte för rotspetsåtgärder som kräver mera kraft
- liknar Heidbrink-rotspetshävar
- ergonomiskt handtag med slintsäkert grepp

LMDental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

