

LM Servo™ E

LM

feel the
difference



Förbättrad säkerhet
och rationellt underhåll



FÖRBÄTTRAD SÄKERHET LM-Servo™ E-kassetten har en patenterad design för att förbättra säkerheten med skydd som förhindrar stick- och skärskador. Den mera slutna utformningen med säkerhetsskydd skyddar också instrumentspetsarna under rengöring och underhåll. LM-Servo™ E är den första kassetten för dentala instrument som uppfyller kapslingsklass IP30 och som verkligen skyddar mot stick- och skärskador.



FÄRGKODNING Färgade säkerhetsskyddslock och plats för LM™ silikonkodknappar (LM 6000-6005) - både på kassetten sidor och på locket - ger flera olika möjligheter till färgkodning till exempel användar- eller procedurspecifika set.

ANVÄNDARVÄNLIGHET Instrumentens handtag är klart synliga så att innehållet i kassetten lätt kan identifieras under hanteringen.

RENGÖRING

Dessutom möjliggör designen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten möjliggörs. Dessutom stöder strukturen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten möjliggörs.



SPÅRBARHET Alternativet för RFID-märkning möjliggör komplett och tillförlitlig spårbarhet av kassetterna med LM Dental Tracking System™. Läs mera på www.dentaltracking.com



KOMPATIBILITET LM-Servo™ E-kassetternas mått överensstämmer med DIN13999-standarden för dentala brickor och är kompatibla med brickor och instrument på tandkliniken.

Kassetterna är lätta, lätthanterade och kan fästas i LM-ServoMax™-brickan (LM 6410) med ett speciallås (LM 6417).



FÖRBÄTTRA MATERIALFLÖDET OCH SPÅRBARHETEN GENOM TILLFÖRLITLIG RFID-TEKNIK med **LM** Dental Tracking System™


LM DTS™ är det första kommersiellt tillgängliga systemet inom dentalindustrin för effektiv spårning och övervakning av dentala instrument och material genom användning av radiofrekvensteknologi (RFID).

Individuella handinstrument och material med RFID-identifikations-etiketter spåras på ett tillförlitligt sätt i varje steg med LM DTS™ RFID-läsare. De underrättar användarna om fel, som t.ex. användning av osteriliserade instrument, för att förbättra patientens säkerhet. DTS-programvaran ger analysrapporter som är lätta att använda för att förbättra förvaltning av tillgångarna och öka kostnadseffektiviteten och patientsäkerheten.

INSTRUMENTKASSETTERNAS UTVECKLINGSSERIE

Den nya LM-Servo™ E-kassettserien finns tillgänglig med inbyggd RFID-märkning. Detta alternativ gör E-kassetterna till ett utmärkt verktyg för att förbättra spårbarheten och ger en enkel hantering och spårning av instrumenten som set.

På LM-Servo™ E-kassetterna är instrumenthandtagen klart synliga så att RFID-etiketten kan avläsas och de individuella instrumenten identifieras fastän spetsarna är täckta av säkerhetsskyddet.

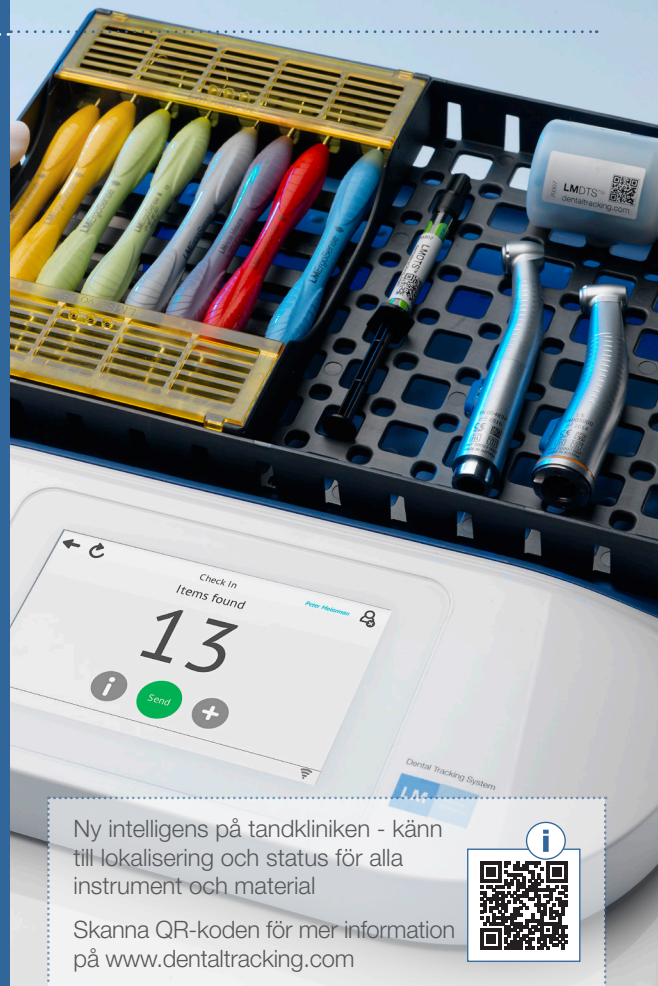

Ny intelligens på tandkliniken - känn till lokalisering och status för alla instrument och material

Skanna QR-koden för mer information på www.dentaltracking.com



UTVECKLINGSSERIE MED FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

LMServo™ E-kassetter

Användning av instrumentkassetter ger ett effektivt och säkert sätt för att behandla, sterilisera och organisera instrumenten på en tandklinik genom att minimera manuell hantering av individuella instrument och rationalisera underhållsprocessen.

Kassetterna i LM-Servo™ E-utvecklingsserien ger en utmärkt kombination av säkerhet och hygien för professionellt bruk, med hänsyn till klinisk personal, underhållspersonal och instrument.

LM-Servo™ E-kassetterna är gjorda av autoklaverbar plast av hög kvalitet, som gör kassetterna lätta och enkla att hantera. Funktionell, patenterad design av säkerhetsskydden tillsammans med en mekanism som är lätt att använda ger ett säkert och tillförlitligt grepp för att hantera, hålla och förflytta kassetterna under alla tandvårdsfunktioner. Säkerhetsskydden förhindrar stick- och skärskador och skyddar instrumentspetsarna så att deras livstid förlängs.

För att förbättra patientsäkerheten och effektiviteten på tandkliniken möjliggör alternativet för märkning av E-seriens kassetter med RFID-chips full spårbarhet tillsammans med LM Dental Tracking System™. Läs mera på www.dentaltracking.com.

RENGÖRINGSEFFEKTIVITET

Vilket inflytande denna slutna utformning av kassetten har på rengöringsresultatet för handinstrumenten, som är placerade inuti kassetten, testades i VTT-undersökningen (1). Efter diskdesinfektorrengöring visade handinstrumenten inte några synliga fläckar av kontamination.

Hållbarhet och rengöringseffektivitet av LM-Servo™ E-kassetten har också testats i interna studier (2). Högkvalitetsmaterialet i kassetternas uppfyller kraven för moderna steriliseringsmetoder och temperaturer.



(1) The effectiveness of sterilization of dental hand instruments. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.



(2) Durability and efficacy of cleaning of the new LM-Servo E cassette in washer-disinfectors and autoclave sterilization. LM-Instruments Oy.



LMServo™ 5E

För fem handinstrument | Fyra färgalternativ för säkerhetsskyddet och även möjlighet till färgkodning med LM™ silikonkodknappar | LM DTS™-kompatibla RFID-märkta versioner tillgängliga | Yttre mått: 180 x 83 x 26 mm | Inre mått: 174,8 x 78,6 x 21,4 mm | Vikt: 75 g



LM 6551 grå
LM 6551T grå DTS

LM 6552 blå
LM 6552T blå DTS

LM 6553 grön
LM 6553T grön DTS

LM 6554 gul
LM 6554T gul DTS

LMServo™ 8E

För åtta handinstrument | Fyra färgalternativ för säkerhetsskyddet och även möjlighet till färgkodning med LM™ silikonkodknappar | LM DTS™-kompatibla RFID-märkta versioner tillgängliga | Yttre mått: 180 x 133 x 26 mm | Inre mått: 174,8 x 128,9 x 21,4 mm | Vikt: 108 g



LM 6581 grå
LM 6581T grå DTS

LM 6582 blå
LM 6582T blå DTS

LM 6583 grön
LM 6583T grön DTS

LM 6584 gul
LM 6584T gul DTS

LM™ kodknappar
20 st/förpackning

LM 6000 blå
LM 6001 grön

LM 6002 orange
LM 6003 röd

LM 6004 gul
LM 6005 brun

LMDental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

